

Protégez votre process

La sonde rétractable Cleanfit CPA875 avec joint breveté garantit la stérilité totale de votre process

Sécurité maximale et simplicité d'utilisation

- **Sécurité de process maximale**
La construction brevetée du joint dynamique empêche la contamination.
- **Fonctionnement simple**
Le capteur peut être retiré, stérilisé et étalonné sans interrompre le process – dans des conditions aseptiques et hygiéniquement garanties.
- **Pas de contamination croisée**
Construction stérile selon EHEDG, 3-A et ASME BPE ainsi que joints selon FDA et USP class VI.
- **Compatible avec les capteurs Memosens**
Memosens, la technologie de capteurs numérique novatrice, permet une mesure fiable et précise dans les industries agroalimentaires et des sciences de la vie.



Totalement stérile et sûr

- La chambre brevetée avec joint "safe-clean" empêche la contamination.
- Joint affleurant (pas d'espace mort) conforme aux critères de la FDA et de l'USP Class VI.
- Certifié EHEDG pour satisfaire aux exigences les plus élevées.
- Les surfaces électropolies et l'inox aseptique garantissent une hygiène et une nettoyabilité maximales.
- La double chambre de maintenance en option permet une sécurité supplémentaire.

Manipulation du capteur en cours de process pour un plus grand confort d'utilisation


- Déplacez et retirez, mesurez, nettoyez, stérilisez et étalonnez sans interrompre votre process.
- La maintenance automatique en option aide à conserver la stérilité de votre process.

Valeurs très précises avec la technologie numérique Memosens

- L'étalonnage en laboratoire sous des conditions optimales garantit la précision des valeurs mesurées.
- La transmission des données inductive sans contact métallique évite toute erreur due à l'humidité.
- Le concept "plug & play" des capteurs Memosens permet de remplacer les capteurs facilement et rapidement.



Grand choix de raccords disponibles en fonction de l'installation.

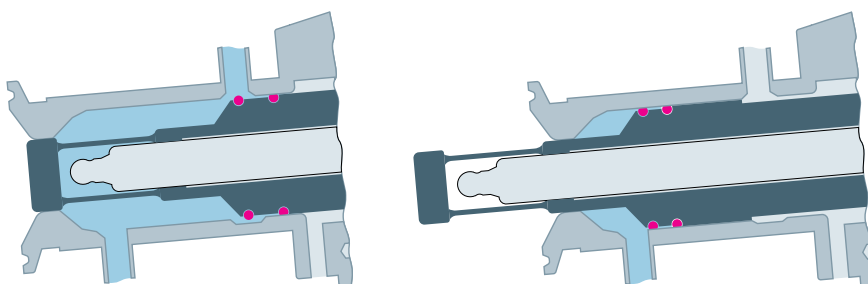

Le joint entre les parties stériles et non stériles se déplace de façon dynamique avec le guide de capteur – selon le principe de la seringue. La partie stérile et le produit de process ne sont pas exposés, ce qui évite toute contamination.



Cleanfit :

La sonde rétractable stérile pour une sécurité de process maximum.

France

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin, BP 150
68331 Huingue Cedex
info@fr.endress.com
www.fr.endress.com

N° Indigo 0 825 888 001
N° Indigo/Fax 0 825 888 009

0,15 € TTC / MN

Agence Paris-Nord
94472 Boissy St Léger Cedex

Agence Ouest
33700 Mérignac

Agence Est
Case 91, 69673 Bron Cedex

Agence Export
Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin, BP 150
68331 Huingue Cedex
Tél. (33) 3 89 69 67 38
Fax (33) 3 89 69 55 10
info@fr.endress.com
www.fr.endress.com

Canada

Endress+Hauser
6800 Côte de Liesse
Suite 100
H4T 2A7
St Laurent, Québec
Tél. (514) 733-0254
Téléfax (514) 733-2924

Endress+Hauser
1075 Sutton Drive
Burlington, Ontario
Tél. (905) 681-9292
Téléfax (905) 681-9444

Belgique Luxembourg

Endress+Hauser SA
13 rue Carli
B-1140 Bruxelles
Tél. (02) 248 06 00
Téléfax (02) 248 05 53

Suisse

Endress+Hauser Metso AG
Kägenstrasse 2
Postfach
CH-4153 Reinach
Tél. (061) 715 75 75
Téléfax (061) 715 27 75